



HF30A

氮气发生器 32 L/Min@7bar



chromalytic

A DÜRR TECHNIK COMPANY

铬析气体



HF30A - Nitrogen Generator

我们非常兴奋能够为市场带来最新的氮气发生器，这源于我们在实验室气体发生器的几十年经验以及专业。

作为迪珥压缩机集团公司的一员，我们的气体发生器能够依赖于迪珥压缩机集团在工业久经考验的空气压缩机技术，对我们的客户来说，这意味着可靠及值得信赖的氮气供应，这都归功于我们的产品核心空气压缩机-突出的质量及耐久性。

设计之初，我们就能够保证超长的电机寿命、简易且低成本的维保，我们能够提供多年的维保备品备件。创新的空压机多模式管理能够完美的处理机械磨损的降低及性能的平衡，最终结果就是为客户最大限度的降低使用成本。

优势：

- Dürr Technik® 空气压缩机技术
- 专为LC-MS 系统优化的产品
- 极低的使用成本
- 可靠的氮气供应，适应各种应用环境
- 简易的维保
- 智能多机冗余联控
- 物联网及联网智能气体发生器
- 冷凝水管理系统-无需外部冷凝水排放



技术参数	HF30A	HF30N
流量	最高到32 升/分钟	
纯度	最高达99%	
压力	7 bar	
内置空气压缩机	是	否
联网	Ethernet / Modbus	
尺寸 (高x宽x长)	695 x 800 x 605 mm	
噪音	<59dB(A) at 1m	<49dB(A) at 1m
冷凝水处理	是	




随着对环境的关注越来越多，ECO模式成为我们所有产品的标准配置，当氮气需求量降低时，能够有效降低能耗及机械磨损。

气体发生器由一个简易的多语言触摸屏控制，为了用户的便利，我们配置了远距离可视化的气体发生器工作状态指示。

随着客户需求多样性的增加，多机组智能联控能够满足高负荷的需求以及提供冗余解决方案，这都归功于内置的Ethernet和MODBUS, 通过将HF30A与可选安全VPN网关结合，我们甚至能够通过WLAN、Wifi或者4G为我们的客户实现远程控制。

HF系列气体发生器能够提供不带内置空压机的解决方案，用户能够自行匹配空压机，如Dürr Technik 空压机组。

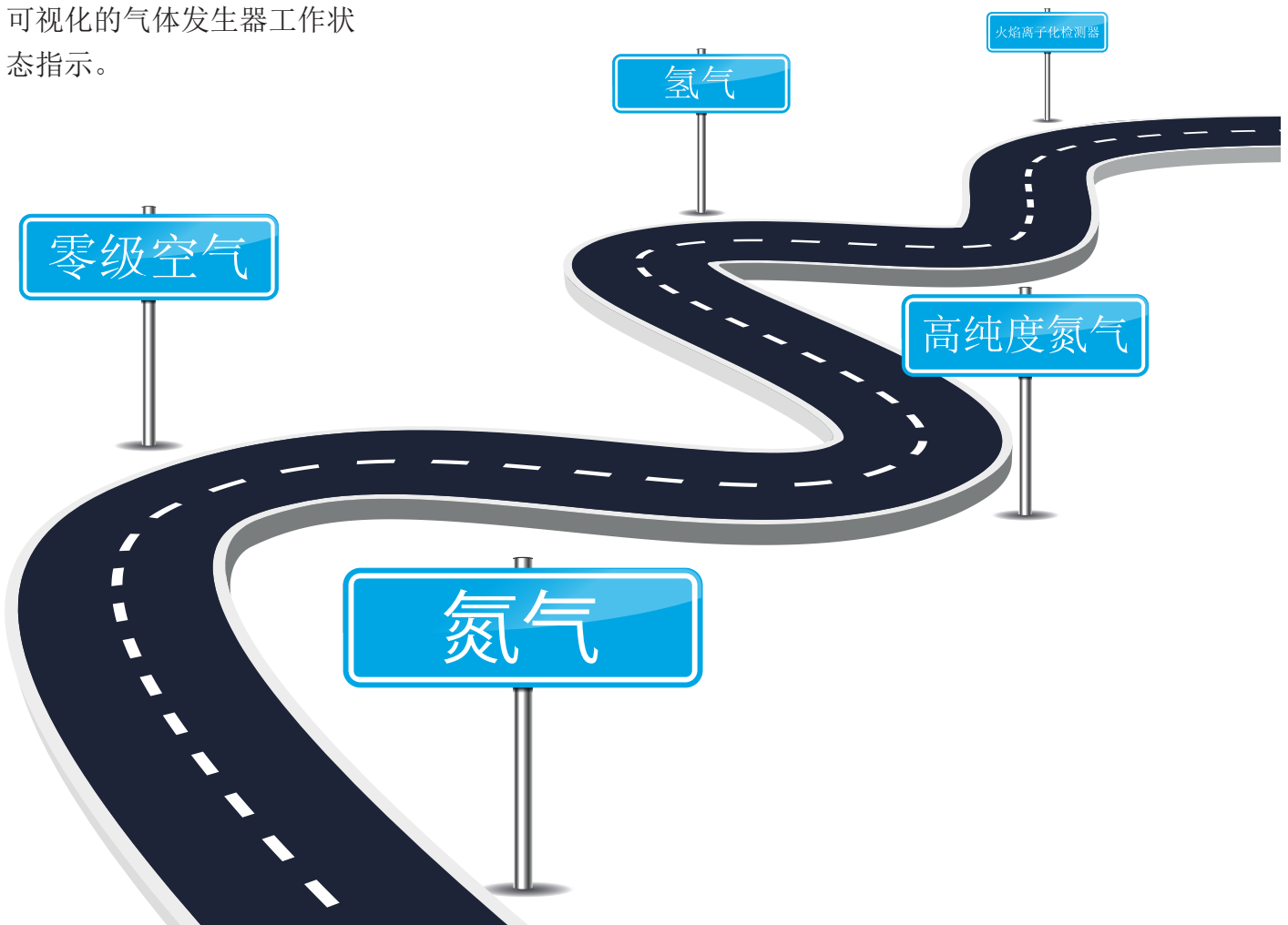



Dürr Technik 解决您的后顾之忧 服务

更多信息请访问我们的
官方网站



技术及售后服务支持

Unit A Lake Works
Cranleigh Road
Fareham
PO16 9DR
UK
Tel. +44 (0)1329 722 072
uk@chromalytic.com
www.chromalytic.com

销售办公室

Germany

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer StraBe 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 7142-90 22-0
Fax +49 7142-90 22-99
office@duerr-technik.de
www.duerr-technik.com

Eastern Europe

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Tel. +48 789 185 246
neuwerth.p@duerr-technik.com

Southern Europe

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Tel +40 725 527 000
draghici.g@duerr-technik.com

France

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Tel +33 4 73 55 89 53
voisin.t@duerr-technik.fr

China

Dürr Technik (Shanghai) Co., Ltd.
Room 416 & 418, Building A, No. 59,
Xude Rd, Xujing Town, Qingpu District
201700 Shanghai, China
Tel. +86 21 6921 8321
Fax +86 21 6921 8322
office@durrtechnik.com.cn
www.durrtechnik.com.cn

Great Britain

Dürr Technik UK Ltd.
Unit 13 The Industrial Quarter
Bath Business Park, Foxcote Avenue
Peasedown St. John
UK-Bath BA2 8SF
Tel. +44 (0) 1761-42 29 44
Fax +44 (0) 1761-42 08 95
office@durrtechnik.co.uk
www.durrtechnik.co.uk

North America

Dürr Technik USA, Inc.
1295 Walt Whitman Road
USA-NY 11747-3062 Melville
Tel.+1 516 214 56 59
Fax +1 516 433 76 84
office@durrtechnikusa.com
www.durrtechnikusa.com

South America

Dürr Technik
Office Latin America
Zeballos 1504 - Beccar - CP1643
Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 11 5263 2320
salesla@duerrtechnik.com

CIS

Dürr Technik GmbH & Co. KG
Tel +7 (916) 934-05-09
latskevich.i@duerr-technik.de



A DÜRR TECHNIK COMPANY

铬析气体

Unit A Lake Works
Cranleigh Road
Fareham
PO16 9DR
UK
Tel. +44 (0)1329 722 072
office@chromalytic.com

www.chromalytic.com

